

## Panther® Link\*

Relie virtuellement plusieurs systèmes Panther® afin de partager des données et d'assurer le suivi à partir d'un tableau de bord centralisé.

**Une valeur ajoutée pour votre laboratoire.** Comprend les économies du système Panther® en plus des économies supplémentaires suivantes :

**ÉCONOMIES  
DE MAIN-  
D'ŒUVRE**

Assure le suivi des inventaires, des entretiens et des messages à partir d'un **tableau de bord centralisé**, afin de réduire le nombre de visites pour chacun des systèmes

**Consultation** des rapports à partir d'un lieu centralisé, afin de maximiser le temps du technicien

**Partage les données du lot de référence, du contrôle de la qualité externe et du compte de l'utilisateur** sur plusieurs instruments, afin de minimiser la saisie manuelle

**Suit et analyse les données de CQ (contrôle de la qualité) pour tous les instruments**, afin d'appuyer les mesures et les procédures de qualité interne

**ÉCONOMIES  
DE TEMPS**

**Partage les requête de tests réflexes** (p. ex., HPV 16 18/45) sur tous les instruments, afin d'offrir plus de flexibilité dans le chargement des échantillons

Utilise les **fonctionnalités de diagnostic** à distance afin d'assurer une résolution rapide des problèmes et la productivité des instruments

**ÉCONOMIES  
DE COÛTS**

**Partage les trousse de réactifs** entre les instruments afin d'assurer une meilleure utilisation et de réduire le temps de préparation et d'entreposage

Empêche le **rechargement par inadvertance** des échantillons avec des résultats de tests valides, afin d'éviter les erreurs humaines stressantes

Rentabilise le Panther **actuel avec une simple mise à niveau en laboratoire**



Ajoute une couche de communication entre les différents instruments Panther afin de partager les inventaires, les réactifs et les résultats.

**PANTHER®**

## Caractéristiques

## Serveur de tableaux de bord

|                        |                                                             |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Processeur             | Processeur Intel Core i5-6500TE (Skylake) cadencé à 2,3 GHz |
| Mémoire                | 16 Go SO-DIMM DDR4 2133                                     |
| Stockage principal     | 1 To 2,5" SSD                                               |
| Réseau                 | Ethernet 1 Go double port                                   |
| Sécurité               | AppArmor                                                    |
| Système d'exploitation | Ubuntu 18.04 LTS                                            |
| Dimensions             | L 19,6 cm x P 5,7 cm x H 26,9 cm                            |

## Tableau de bord à partir de l'ordinateur client

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Processeur             | Intel Braswell Celeron N3160     |
| Mémoire                | 4 Go SO-DIMM DDR3L 1600          |
| Stockage principal     | 32 Go mSATA SSD                  |
| Réseau                 | Ethernet 1 Go                    |
| Système d'exploitation | Porteus Kiosk 4.8.0              |
| Dimensions             | L 11,7 cm x P 3,7 cm x H 11,2 cm |
| Supports de fixation   | Support mural                    |

## Affichage des commandes sur le tableau de bord

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Navigateurs utilisés | Chrome ou mobile Safari (iPad seulement) |
|----------------------|------------------------------------------|


Concurrence maximale 50  
pour les clients Web

Résolution 4 K (3 840 x 2 160)


Modèle/dimensions QM49R Samsung 49" ou QM55R Samsung 55" ou QM65R Samsung 65" ou Dell P2415Q 23,8" de 4K UHD et possibilités d'accéder à partir d'un iPad (version iOS 12 ou plus récente/version 2018 pour iPad ou version plus récente)

## Pare-feu

|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Modèle             | Cisco ASA 5506-X               |
| Dimensions         | L 20 cm x P 4,4 cm x H 23,4 cm |
| Mémoire            | 4 Go                           |
| Stockage principal | 50 Go mSATA SSD                |

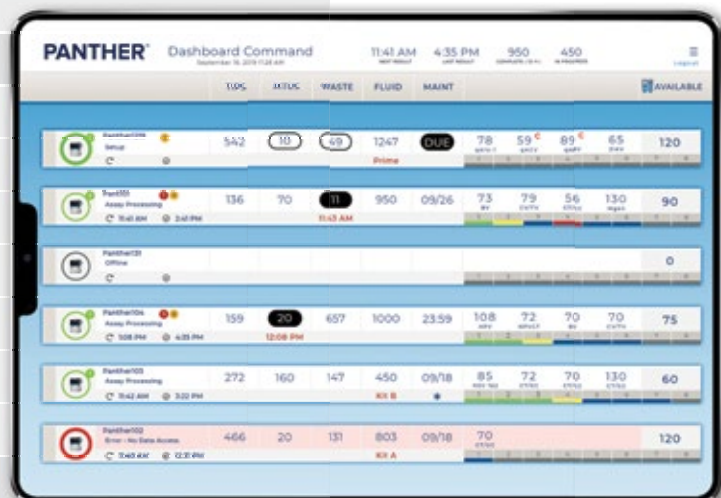

Accès aux statuts de l'instrument et messages à partir d'un iPad.

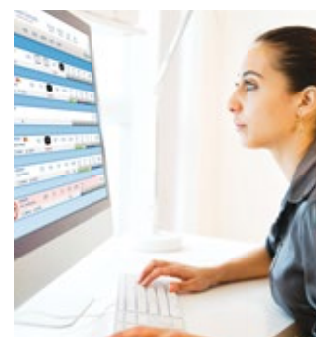

Accès aux données de l'instrument et résultats à partir d'un ordinateur de bureau.