

Panther® Plus

Augmente la capacité, le temps de fonctionnement et le débit aux 24 heures.

Une valeur ajoutée pour votre laboratoire. Comprend les économies du système Panther® en plus des économies suivantes :

**ÉCONOMIES
DE MAIN
D'ŒUVRE**

Augmente votre capacité à réaliser au moins 120 UTM (600 tests) grâce à 13,5 heures de fonctionnement avant la charge suivante

Élimine les déchets liquides directement dans les drains ou les éviers du laboratoire, et évite une élimination manuelle

**ÉCONOMIES
DE TEMPS**

Accès au changement des fluides universels pendant l'analyse des échantillon afin d'éviter les perturbations au début ou à la fin du quart de travail

Capacité d'éliminer les déchets solides à la demande sans interrompre l'analyse des échantillons, et d'augmenter votre débit jusqu'à 210 tests supplémentaires en 24 heures

Changement des fluides et élimination des déchets pendant le traitement afin de **minimiser vos activités de démarrage** et vous permettre de commencer plus rapidement les tests et d'obtenir plus vite vos résultats

**ÉCONOMIES
DE COÛTS**

Optimise l'utilisation de vos fluides universels et de vos sacs poubelles en les changeant moins souvent, ce qui vous permet de réduire votre volume de déchets et les frais qui y sont associés

Une mise à niveau en laboratoire vous permet d'augmenter votre capacité, votre temps de marche et votre débit sans remplacer votre équipement ou vos infrastructures

Les options Panther® Plus offrent une grande flexibilité

■ Option 1

Fluides/déchets en continu

■ Option 2

Fluides/déchets en continu + déchets liquides raccordés à la plomberie

■ Option 3

Fluides/déchets en continu + expansion de l'UTM

■ Option 4

Fluides/déchets en continu + déchets liquides raccordés à la plomberie + expansion de l'UTM



Panther Plus offre la possibilité de choisir les mises à niveau qui répondent le mieux aux besoins de votre laboratoire.

PANTHÈRE®

Caractéristiques

Option 1 : fluides/déchets en continu

Description	Le module fluides/déchets en continu est une mise à niveau de la partie inférieure de l'instrument Panther®, qui permet (1) de remplacer un ensemble de fluides universels lorsqu'ils sont épuisés et (2) de jeter les contenants de déchets solides et liquides pendant le traitement, ce qui offre une plus grande flexibilité et un meilleur débit.
Dimensions	Inchangées par rapport au système Panther
Poids du Panther avec le module	365 kg
Exigences électriques	Inchangées par rapport au système Panther
Dissipation de la chaleur	Inchangée par rapport au système Panther

Option 2 : fluides/déchets en continu + déchets liquides raccordés à la plomberie


Description	Option 1 avec en plus la possibilité de jeter les déchets liquides directement dans le drain du plancher ou de l'évier pour réduire le travail manuel.
Dimensions	L 144 cm x P 81,5 cm x H 175 cm
Poids du Panther avec le module	368 kg
Exigences électriques	Inchangées par rapport au système Panther
Dissipation de la chaleur	Inchangée par rapport au système Panther

Option 3 : fluides/déchets en continu + expansion de l'UTM

Description	Option 1 avec en plus le module d'expansion de l'UTM, ce qui permet de charger jusqu'à 125 UTM (600 tests) en une seule fois afin d'augmenter la capacité de travail et le temps de fonctionnement.
Dimensions	L 149 cm x P 81,5 cm x H 175 cm
Poids du Panther avec le module	422 kg
Exigences électriques	Inchangées par rapport au système Panther
Dissipation de la chaleur	Inchangée par rapport au système Panther

Option 4 : fluides/déchets en continu + déchets liquides raccordés à la plomberie + expansion de l'UTM

Description	Option 1 en plus de (1) la possibilité de jeter les déchets liquides directement dans le drain du plancher et (2) le module d'expansion de l'UTM qui permet de charger au moins 125 UTM (600 tests), optimisant ainsi la flexibilité, le débit et le temps de marche.
Dimensions	L 149 cm x P 81,5 cm x H 175 cm
Poids du Panther avec le module	427kg
Exigences électriques	Inchangées par rapport au système Panther
Dissipation de la chaleur	Inchangée par rapport au système Panther

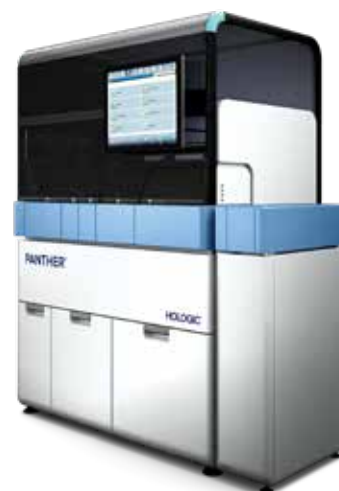

Le module d'expansion de l'UTM est une mise à niveau du système Panther réalisée en laboratoire.



Le module de fluides/déchets en continu est une mise à niveau du système Panther réalisée en laboratoire.